


Wiederbefestigen einer provisorischen Krone mit NoMix



Hierfür sollte die Krone NICHT defekt sein. Sind sie sich unsicher, suchen sie einen Zahnarzt auf!

Materialien: NoMix Befestigungszement, Zahnstocher oder Zahnpick, Zahnseide

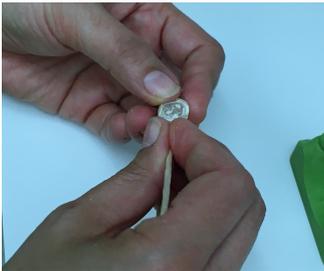

- 1) Krone gründliche mit Zahnstocher oder Zahnpick reinigen
- 2) Krone auf den Zahn probieren und langsam zubeissen - Passt alles? Stört nichts? dann geht es weiter



- 3) Richtung des Einsetzens merken



- 4) NoMix öffnen



- 5) Material in die Krone geben und mit Zahnstocher oder Zahnpick verteilen - nicht zu viel, nicht zu wenig



- 6) Krone aufsetzen und nochmals langsam zubeissen - kein Hindernis? Alles passt? Prima!

- 7) 5 min Zähne zugebissen lassen

- 8) danach Kelberreste mit Zahnseide und Zahnstocher oder Zahnpick entfernen



- 9) 30 min zum Essen warten